



SILICONE LARYNGEAL MASK TUBE

喉頭面罩管（未滅菌）

LMT-Standard

- 衛署醫器製壹字第 001175 號 -



ANESTHETIC | 麻醉科系列
SERIES



喉頭面罩管

衛署醫器製壹字第 001175 號

富強® 喉頭面罩管 (Laryngeal Mask Tube (LMT-Standard))

特點：


- 富強® 喉頭面罩管由口置入患者咽喉部供麻醉插管使用以維持呼吸道暢通的器材。
- 兼具氣管內管以及麻醉面罩的優點，它可以用較少的人力物力，快速地建立呼吸道。
- 柔軟和低摩擦力的氣墊減少插管的困難並提供絕佳的密封效果及患者的舒適度。
- “無會厭攔槓”的設計，提供了易於穿過管內腔的無障礙通道，以便於清潔。
- 氣墊平滑且牢固的背板更有助於插管。
- 獨特的隱藏式充氣腔，將充氣管線隱藏在管壁內，可減少插管時額外的照護並避免因牙齒咬管或現場器械所造成的意外損害。
- 8種尺寸可供選擇：1.0，1.5，2.0，2.5，3.0，4.0，5.0及6.0。

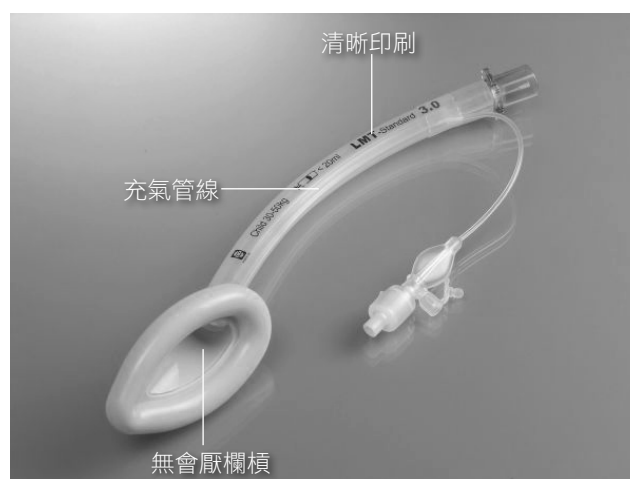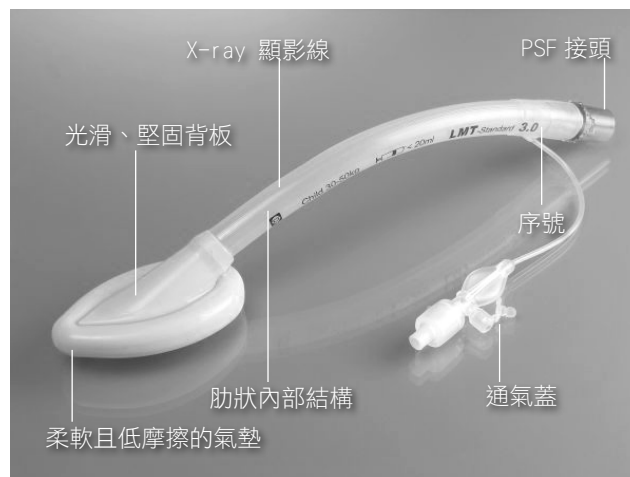

規格 SPECIFICATIONS

喉頭面罩管 (LMT 標準型)
(Silicone Laryngeal Mask Tube, LMT-Standard):

產品編號	尺寸	患者體重	最大充氣容積	說明
1580-0010	1.0	未滿月 < 5kg	4 ml	
1580-0015	1.5	嬰兒 5-10 kg	7 ml	
1580-0020	2.0	嬰兒 10-20 kg	10 ml	- 一次性使用
1580-0025	2.5	兒童 20-30 kg	14 ml	- 矽膠材質
1580-0030	3.0	兒童 30-50 kg	20 ml	- PSF 接頭
1580-0040	4.0	成人 50~70 kg	30 ml	- X 光顯影線
1580-0050	5.0	成人 70~100 kg	40 ml	- 通氣蓋
1580-0060	6.0	成人 >100 kg	50 ml	

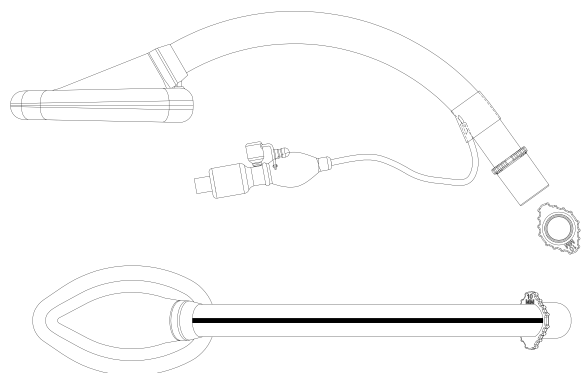

1580-00XX



fortune
medical

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw