



# GASTROSTOMY CATHETER

## 胃造瘻管

醫療矽膠材質，提升患者舒適度

- 衛署醫器製字第 001348 號 -



GASTROENTEROLOGIC | 腸胃系列  
SERIES

# 胃造瘻管

衛署醫器製字第 001348 號

## 富強® 胃造瘻管 (Silicone Gastrostomy Catheter)

### 特點：


- 用於長期腸道灌食和藥物輸送。
- 醫療級矽膠製成，具良好生物相容性。
- 軟硬適中且富彈性，增加病患舒適感。
- 管身透明，易於目視觀察。具 X-ray 顯影線，可藉此來觀察插管位置。
- 具刻度標示，可作為插管位置的參考。
- 管端為圓寬開口設計，增加流量，將置入時的傷害降到最低。
- 短管端設計減少對胃黏膜的刺激。
- 餵食漏斗內側具環狀突起設計，可連接其他器材。
- 餵食漏斗配有塞子，可防止感染與空氣進入。
- 具有矽質固定襯墊可防止導管的移動、減少膠帶與縫線的使用。
- 平日穿衣易於隱藏並更加舒適。
- 附有藥物注射孔。
- 不含乳膠與鄰苯二甲酸。



## 規格 SPECIFICATIONS

### 富強® 胃造瘻管 (Silicone Gastrostomy Catheter):

產品編號	尺寸	氣囊容量	長度	X-ray		固定片
				深度標示	顯影線	
2019-0012	12FR	5-10cc	255 mm			
2019-0014	14FR					
2019-0016	16FR	10-20cc		2		
2019-0018	18FR			4		
2019-0020	20FR			6	yes	yes
2019-0022	22FR	15-20cc		8		
2019-0024	24FR			10		
2019-0026	26FR			cm		
2019-0028	28FR					

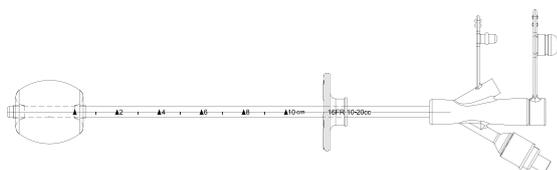

2019-00XX

# 胃造瘻管

衛署醫器製字第 001348 號

## 矽質胃造瘻管, ENFit 接頭 特點: (Silicone Gastrostomy Catheter with ENFit Connector)


- 矽質胃造瘻管用於長期腸道灌食和藥物輸送。
- 擁有紫色 ENFit 連接器的矽膠胃造瘻管具備柔軟靈活性，包含一個矽質固定襯墊，一個矽質球體與矽質三叉接頭。
- 管身透明，具 X-ray 顯影線可輕鬆且準確地察覺插管位置。管身具深度標示，方便確認管道位置。
- 管端有圓角及寬開口設計可增加流量，短管端設計減少對胃黏膜的刺激。
- 胃造瘻管末端三叉接頭的餵食腔與注藥腔皆附上 ENFit 公接頭與 ENFit 母蓋子，停止餵食與注藥時可將 ENFit 母蓋子順時針旋轉蓋住，以防空氣進入體內。
- 矽質固定襯墊可防止導管的移動，減少膠帶與縫線的使用。
- 使用 ENFit 連接頭能預防非腸道導管接頭之錯誤連接風險，為患者提供更安全的進食和藥物通道。



## 規格 SPECIFICATIONS

### 矽質胃造瘻管, ENFit 接頭 (Silicone Gastrostomy Catheter with ENFit connector):

產品編號	尺寸	球體	長度	深度標記	說明
2019-0512	12FR	5-10cc			
2019-0514	14FR				
2019-0516	16FR	10-20cc		2	-矽質固定襯墊
2019-0518	18FR				-ENFit 公接頭 x2 件
2019-0520	20FR	256 mm		4	-ENFit 母蓋子 x2 件
2019-0522	22FR				-FEED 餵食腔標識
2019-0524	24FR	15-20cc		6	-MED 注藥腔標識
2019-0526	26FR				-刻度印刷
2019-0528	28FR			10	-X-ray 顯影線

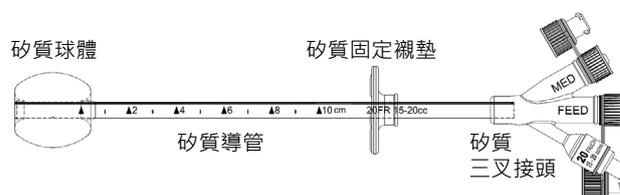

2019-05XX



醫療器材商地址：  
251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓  
電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266  
富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw