



# SILICONE FOLEY BALLOON CATHETER

## 矽質導尿管

- 矽質雙（三）叉導尿管
- 一體成型導尿管

## “富強” 導尿管

- 衛署醫器製字第 001028 號 -




UROLOGICAL | 泌尿系列  
SERIES

## 富強® 矽質雙叉導尿管 (Silicone 2 way Foley balloon Catheter)

### 特點：

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 透明管身，具 X-ray 顯影線，易於視覺觀察液體與插管位置。
- 氣囊柔軟具適應性，使用時可順應膀胱構造而服貼。
- 管身圓型平滑，氣囊完整服貼，可有效降低插管及拔管時可能造成的傷害。
- 堅固而有彈性的端頭可更容易插入導尿管。
- 經過滅菌的雙層包裝。
- 182X/1830/4822 系列建議使用天數則為 29 天。

- A** 幼兒專用 (Pediatric)
- B** 標準 5-10cc/ml  
(Standard, 5-10cc/ml)
- C** 標準 20-30cc/ml  
(Standard, 20-30cc/ml)
- D** 女用 (Female)

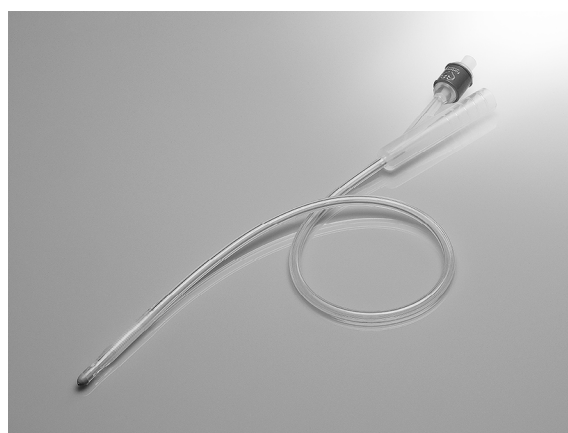

## 規格 SPECIFICATIONS

### 矽質雙叉導尿管，幼兒專用： (2-Way Foley Balloon Catheter, Pediatric):

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1821-0506	6 FR	1-1.5 cc/ml	330 mm	- 輔助線
1821-0508	8 FR	2-3 cc/ml		- X-ray 顯影線
1821-0510	10 FR	3-5 cc/ml		



1821-05XX

# “富強” 導尿管

衛署醫器製字第 001028 號

## 矽質雙叉導尿管，標準 5-10cc/ml： (2-Way Foley Balloon Catheter, Standard, 5-10cc/ml)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1822-0512	12 FR			
1822-0514	14 FR			
1822-0516	16 FR			
1822-0518	18 FR	5-10 cc/ml	420 mm	-X-ray 顯影線
1822-0520	20 FR			
1822-0522	22 FR			
1822-0524	24 FR			
1822-0526	26 FR			



1822-05XX

## 矽質雙叉導尿管，標準 20-30cc/ml： (2-Way Foley Balloon Catheter, Standard, 20-30cc/ml)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1823-0514	14 FR			
1823-0516	16 FR			
1823-0518	18 FR			
1823-0520	20 FR	20-30 cc/ml	420 mm	-X-ray 顯影線
1823-0522	22 FR			
1823-0524	24 FR			
1823-0526	26 FR			



1823-05XX

## 矽質雙叉導尿管，女用： (2-Way Foley Balloon Catheter, Female)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1824-0512	12 FR			
1824-0514	14 FR			
1824-0516	16 FR			
1824-0518	18 FR	5-10 cc/ml	250 mm	-X-ray 顯影線
1824-0520	20 FR			
1824-0522	22 FR			
1824-0524	24 FR			
1824-0526	26 FR			



1824-05XX

## 導尿管塞： (Catheter Spigot)

產品編號	尺寸	說明
1820-0000	Universal	ABS 滅菌包裝 50 pcs/盒



1820-0000

## 富強® 矽質三叉導尿管 (Silicone 3 way Foley balloon Catheter)

### 特點：

- 醫療級矽膠，具良好生物相容性。
- 透明管身，具 X-ray 顯影線，易於視覺觀察液體與插管位置。
- 氣囊柔軟具適應性，使用時可順應膀胱構造而服貼。
- 3 通道設計，灌注管上有附加塞子。
- 漏斗可以連接任何灌洗袋。
- 堅固而有彈性的端頭可更容易插入導尿管。
- 具有引流腔、充水腔、注藥腔之三腔分流設計。
- 經過滅菌的雙層包裝。
- 前端開孔的三叉導尿管放入導引鋼絲，可解決導尿困難的問題。

### A 矽質三叉導尿管 (Silicone 3-Way Foley Balloon)



## 規格 SPECIFICATIONS

### 矽質三叉導尿管： (3-Way Foley Balloon Catheter)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
1830-0514	14 FR			
1830-0516	16 FR			
1830-0518	18 FR			- 灌注管上有附加塞子
1830-0520	20 FR	20-30 cc/ml	420 mm	- X-ray 顯影線
1830-0522	22 FR			
1830-0524	24 FR			
1830-0526	26 FR			



1830-05XX

## “富強” 導尿管 衛署醫器製字第 001028 號

### 富強® 矽質一體成型導尿管 (Fortune® Foley Integrated Balloon Catheter)


一般普通氣囊導尿管，由於其厚度，它在附著到管道軸上後會形成一個不平整的邊緣。氣囊和導管之間的這個結合邊緣最終會在插拔過程中增加患者的不適感。

**富強® 矽質一體成型導尿管**，旨在減少導尿過程中的不適感，消除了普通氣囊不平整的邊緣。氣囊獲得專利，與導管一體成形，形成完全光滑的表面。氣囊和導管之間沒有產生結合邊緣，盡可能減少尿道內的摩擦並減少患者的不適感。182X/1830/4822 系列建議使用天數則為 29 天。


#### 特點：

- 氣囊整合到導管上專利。
- 表面完全光滑。
- 減少尿道內的摩擦。
- 減少創傷和次級損害。
- 減少插入和拔出過程中的不適感。
- 減少尿沉澱物的積聚。

#### A 矽質一體成型導尿管 (Silicone Foley Integrated Balloon Catheter)

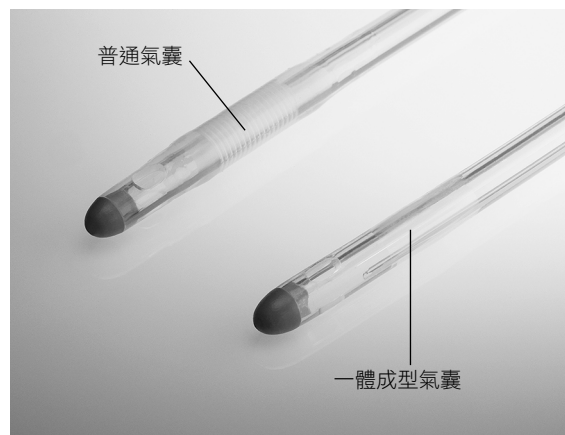

建議：可搭配富強® 導管固定貼 FixPad®，減少導管因病患活動所造成脫落的機會。

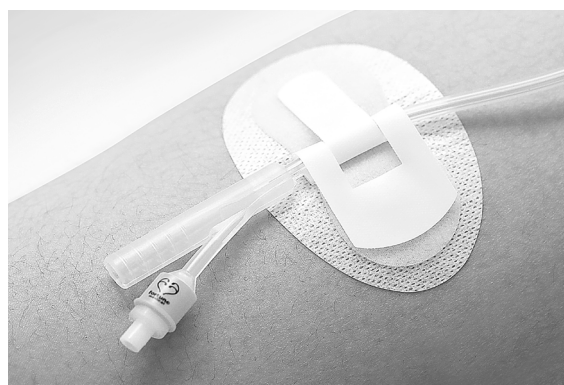

# “富強” 導尿管

衛署醫器製字第 001028 號

## 規格 SPECIFICATIONS

矽質一體成型導尿管：  
(Silicone Foley Integrated Balloon Catheter)

產品編號	尺寸	氣囊	長度	說明
4822-0512	12 FR			
4822-0514	14 FR			
4822-0516	16 FR			
4822-0518	18 FR	5-10 cc/ml	420 mm	-一體成型氣囊
4822-0520	20 FR			-X-ray 顯影線
4822-0522	22 FR			
4822-0524	24 FR			
4822-0526	26 FR			



4822-05XX



**fortune**  
medical

醫療器材商地址：

251 新北市淡水區中正東路二段 29 號 6 樓

電話：(886) 2-2624-2233 傳真：(886) 2-2624-2266

富強醫材股份有限公司 www.fortunemed.com.tw